

Vákuumos testtartás-párnák

Termékkatalógus



Stabilitás, amely igazodik Önhöz.

Üdvözljük a Stabilo System-nél



Pozícionáló és stabilizáló párnák és matracok speciális testhelyzeti megtámasztást igénylő személyek számára. Termékeink kényelmet, támaszt és optimális testtartást biztosítanak, alkalmazkodva minden felhasználó igényeihez.

Krakkóban kézzel készülő Stabilo termékek több mint 20 év tapasztalatát ötvözik a bevált technológiával, garantálva a megbízhatóságot és a kiemelkedő minőséget.

Kövessen minket @StabiloSystem oldalunkon a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on – történetekért, tippekért és inspirációért!

Tartalomjegyzék

Bevezetés	Ismerje meg a Stabilo System-et	05
	Hogyan készülnek termékeink?	07
	Hogyan működik a Stabilo?	07
	Cégünk története	08
Stabilo System termékek	Kerekesszék-párnák	
	Base medencestabilizáló ülőpárna	11
	Base Hilo ékes ülőpárna medencestabilizáláshoz	13
	Base Doro ülőpárna ékkel és oldalsó párnákkal	14
	Comfortable törzsmerevítő háttámla	15
	Comfortable Plus fűzőszerű háttámla	16
	Comfortable Plus Duo ülőke a törzs, végtagok és fej stabilizálásához	18
	Comfortable Plus Duo Hilo ékkel ellátott ülőke a törzs, végtagok és fej stabilizálásához	20
	Armrest könyöktámasz	21
	Headrest fejtámasz	22
	Collo gallér	24
	Positioning seats	
	Beanseat ortopédiai ülőke	25
	Multiseat hát- és fejtámasztó ülőke	27

	Matracok	
	Grande matrac	28
	Terápiás termékek	
	Flat lábpad	30
	Banana banán	31
	Roll henger	32
	Wedge ék	33
	Fürdőpárnák	
	Bath Bagel fürdőtámasz-párna	34
Stabilo System kiegészítők	Kézi pumpa	37
	Elektromos pumpa	37
	Autós töltő	37
	Akkumulátoros töltő	38
	Neoprén szíj	38
	Rögzítőszíj	38
	Stabilizáló rövidnadrág	39
	Stabilizáló mellény	39
	Fejtámasz rögzítő	39
	Splint – könyöktámasz rögzítő	40
	MembraMed membránnal ellátott huzat	40
	Sticky Pad – csúszásgátló alátét	40
	Tubo	41
	Beanroller	41
	Bob	41
Gyakorlati információk	Stabilo Tépőzár	43
	Biztonsági és minőségi garancia	44
	Mosás és fertőtlenítés	46
	Párna formázása	47
Mérettáblázat	Stabilo System párnák	51
	Stabilo System kiegészítők	54

Bevezetés

Ismerje meg a Stabilo System-et ⁰⁵

Hogyan készülnek termékeink? ⁰⁷

Hogyan működik a Stabilo? ⁰⁷

Cégünk története ⁰⁸

Ismerje meg a Stabilo System-et

A Stabilo System fogyatékkal élő személyek számára kifejlesztett pozicionáló és stabilizáló matrac- és párnarendszer, amely a megfelelő testhelyzet kialakítását, stabilizálását és fenntartását szolgálja ülés és fekvés során.



A Stabilo egy bevált technológia, amely forradalmasítja a testmegtámasztásról, az ülésről és a rehabilitációról alkotott elképzeléseinket.

A párna napi szintű, a felhasználó aktuális igényeihez igazítható beállíthatósága révén kivételes ülési kényelmet, egyenletes nyomáeloszlást és kiváló stabilizálást biztosít – a párna alkalmazkodik a test formájához, függetlenül a deformáció vagy görbület mértékétől.



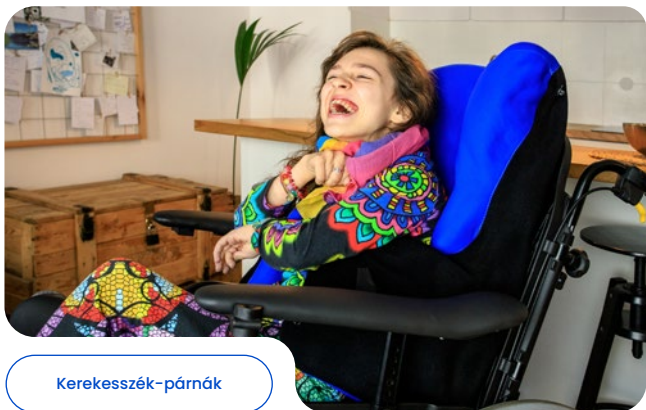
Azoknak, akik mindennapi működésükben támogatásra szorulnak.

A Stabilo párnákat olyan személyeknek tervezték, akiknek segítségre van szükségük a helyes testtartás megőrzéséhez és a mozgáskorlátozottság enyhítéséhez.


A törzs, a végtagok és a fej stabilizálását biztosítják, hatékonyan kompenzálva a testi deformációkat és javítva a mindennapi kényelmet.

A Stabilo több mint egy párna.


A Stabilo egy teljes testtartástámogató rendszer: kerekesszék-párnák, pozicionáló ülőkék, matracok, terápiás termékek és fürdőpárnák.



Kerekesszék-párnák

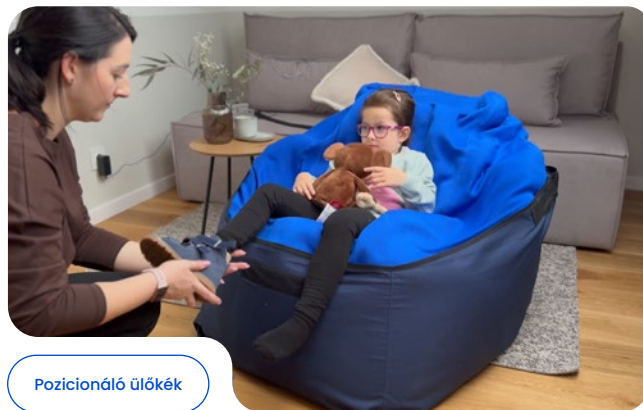


Pozicionáló ülőkék

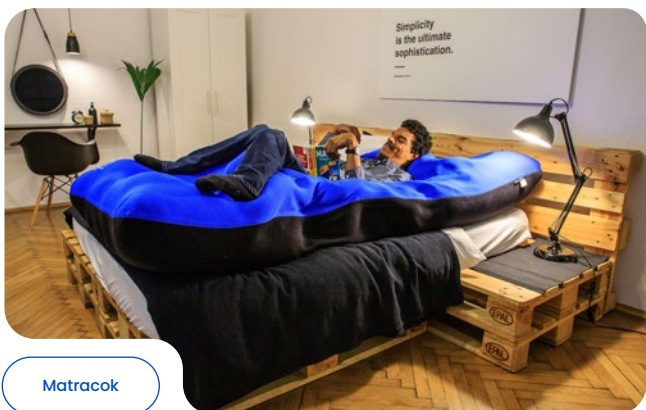

Matracok



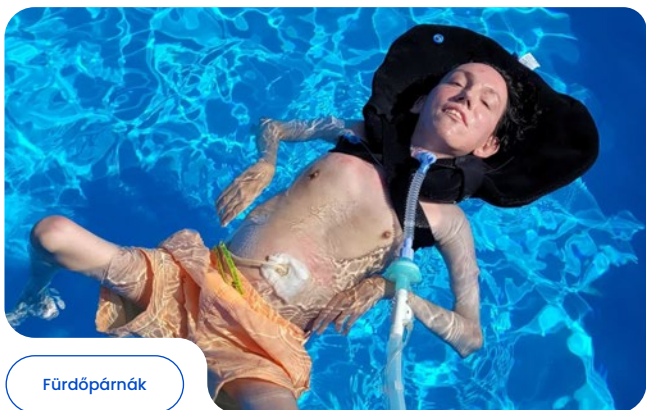Terápiás termékek



Fürdőpárnák

A Stabilo termékek a nap minden szakaszában megbízható támogatást nyújtanak: az iskolában és a terápiás foglalkozások közben elősegítik a koncentrációt és a megfelelő testhelyzet fenntartását; a rehabilitációt követően hozzájárulnak az elért eredmények megőrzéséhez; otthon kényelmet és biztonságot biztosítanak a pihenéshez és a családdal töltött időhöz; valamint kültéri tevékenységek és utazás során is alkalmazhatók – például kajakozás, kerékpározás, kerékpáros riksák vagy egyéb járművek használata közben.

Mindez azért, hogy felhasználóink a lehető legaktívabban élhessenek, teljes potenciáljukat kibontakoztathassák, miközben megőrizzük a helyes testtartást.

Kézzel készítve, szenvedéllyel és precizitással.

Termékeinket a krakkói NOEL Żebrowski gyárban, kézzel készítik – emberek által, embereknek. A szövet vágásától a kész termék gondos csomagolásáig a teljes folyamat saját gyártósorainkon zajlik.

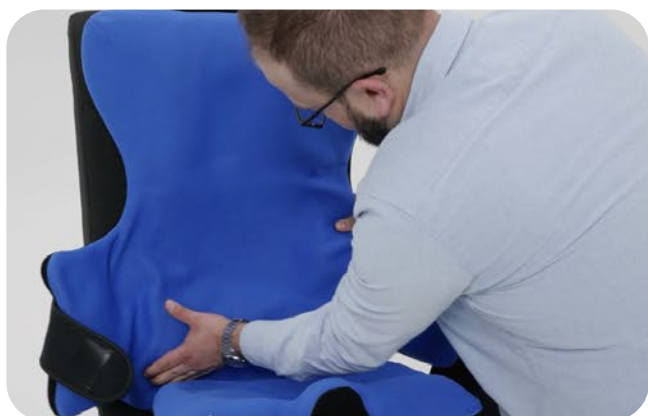
A Stabilo termékcsalád fejlesztésének 15 éve alatt ISO 13485 szabványokon alapuló saját gyártástechnológiát fejlesztettünk ki. Ennek köszönhetően garantálni tudjuk minden termékünk tartósságát, biztonságát és megbízhatóságát.



Szkennelje be a QR-kódot, és fedezze fel, hogyan készülnek termékeink.



NOEL



Hogyan működik a Stabilo?

A párna beállítása egyszerű és intuitív. A puha párna alkalmazkodik a test formájához, vagy lehetővé teszi a felhasználó testhelyzetének korrigálását, majd egy dedikált pumpa segítségével eléri az optimális keménységet, amely jó stabilizálást biztosít és fenntartja a kívánt testtartást.

Nézze meg, milyen egyszerű!

Lapozzon a 47. oldalra, és tanulja meg, hogyan kell megfelelően formázni a párnát és stabilizálni a felhasználót a dedikált pumpa segítségével.

Cégünk története

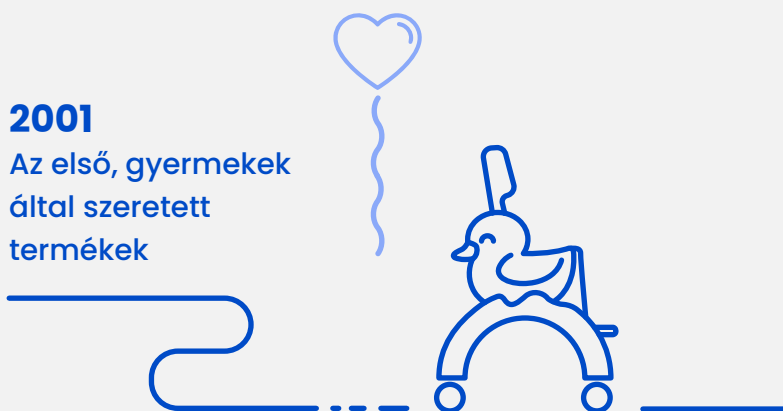
2000

Így kezdődött
történetünk



2001

Az első, gyermekek
által szeretett
termékek



2011

Az első
Rehacare

2013

A Stabilo és az AAT GB
egyesíti erőit.
Megszületik az első
Chilli Bean ülőke.



2016

A Hippocampe
forgalmazása
Lengyelországban



2019

Márka-újrapozicionálás



A fejlődés új
szakaszának és a jövőre
való friss rálátásnak a
jelképe.



2006

A Stabilo születése.

A mindent megváltoztató pillanat!



Bevezettük az első Stabilo párnát a piacra, amely forradalmasította a stabilizáláshoz való hozzáállást a vákuumos formaörzésnek köszönhetően.

2009

Aranyérem az innovációért



Ma

Több mint 40 országban vagyunk jelen, és folyamatosan növekszünk!



2024

Kényelmes és biztonságos utazás a Voyageur-rel



Stabilo System termékek



Kerekesszék-párnák ¹¹



Pozicionáló ülőkék ²⁴



Matracok ²⁷



Terápiás termékek ²⁹



Fürdőpárnák ³⁴



Base

medencestabilizáló ülőpárna

A Base párna egy stabilizáló ülőke, amely medence-deformációkban és csípőaszimmetriában szenvedő személyeket támogat. Kényelmet és megkönnyeb-
bülést nyújt, miközben javítja a testtartást. Kerek-
esszékhez vagy rehabilitációs székhez ideális, precíz
beállítást tesz lehetővé, növelve a felhasználó
kényelmét és biztonságát.



Terméktulajdonságok



Lehetővé teszi ék formázását, biztosítva a combok
távolítását az anatómiának megfelelően, ami különösen
fontos csökkent vagy fokozott izomtónus és kontraktúrák
esetén.



Lehetővé teszi az egyik csípő megemelését, javítva a
stabilizálást és az ülési kényelmet, különösen a ferde
medencetartással rendelkező személyek számára.



Tökéletes illeszkedésének köszönhetően egyenletesen osztja
el a nyomást, csökkentve a felfekvési sebek kockázatát.



Az elülső tekercs és a combcsatornák kialakításának
lehetősége lehetővé teszi a mélyülős pozíció elérését,
fokozva a stabilitást és a biztonságot ülés közben.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítősíj
+ Sticky Pad





Base Hilo

ékes ülőpárna medencestabilizáláshoz

A Base Hilo párna egy kiemelkedő láb-abdukáló ékkel rendelkező stabilizáló ülőke, amely a Base modell fejlett változata. Stabilizálja a felhasználót ülés közben, az ék pedig segít az alsó végtagok semleges helyzetben tartásában, megelőzve az adductor-kontraktúrákat.



Terméktulajdonságok



Az elülső tekercs és a combcsatornák kialakítása lehetővé teszi a mély ülő pozíció elérését.



A kontúros forma csökkenti a nyomást a csontos kiemelkedéseken.



Aszimmetrikus medencetámaszt tesz lehetővé a ferde medencetartással rendelkező személyek számára.



A speciálisan kontúrozott ék abdukált helyzetben tartja a lábakat, megakadályozva azok keresztezését.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítősíj
+ Sticky Pad



Base Doro

ülőpárna ékkel és oldalsó párnákkal

A Base Doro párna egy fejlett stabilizáló ülőke, amelyet abdukciós ékkel és a teljes medencét stabilizáló oldalsó párnákkal szereltek fel. A Base Hilo modell továbbfejlesztett változata, amely egyidejű csípőkorrekciót és teljes stabilizálást tesz lehetővé.



Terméktulajdonságok



Javítja a törzskontrollt, különösen azoknál, akik nehezen tartanak fenn stabil pozíciót hagyományos ülőkékben.



Fokozza a medence és csípő stabilizálását, ösztönözve a felhasználót a törzsizmok aktívabb használatára.



Csípőstabilizálást biztosít ficamok és rotációs eltérések esetén.



Az oldalsó párnák hatékonyan stabilizálják és korrigálják a medence helyzetét.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa
+ neoprén szíj

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítőszíj
+ Sticky Pad



Comfortable

törzsmerevítő háttámla

A háttámla-párna kényelmes támaszt nyújt és tehermentesíti a gerincet. Javítja az ülési kényelmet testtartási rendellenességekkel, csökkent izomtónussal rendelkező vagy ülés közben további támaszt igénylő személyek számára.



Terméktulajdonságok



A kiválasztott területeken a forma és vastagság beállíthatósága növeli a kényelmet súlyos, közepes és enyhe gerincdeformitások, valamint spina bifida és testi asszimetria esetén is.



Az anatómiai forma és könnyű kialakítás egyszerűvé teszi a kerekesszékekbe, rehabilitációs székbe, egyszerű székbe vagy autóba történő beépítést.



Stabilizálja és támogatja a testkontrollt, javítja az ülési testtartást.



Az egész hátsó felületet megtámasztja, megkönnyíti a testtartási rendellenességek és gerincgörbületek korrekcióját.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítősíj
+ Tubo



Comfortable Plus

fűzőszerű háttámla

Az oldalsó párnákkal ellátott hátstabilizáló párna kényelmes támaszt nyújt, segít a testtartási rendellenességek korrigálásában és javítja a testkontrollt. A széles oldalsó párnák és a nagy fejtámasz stabilizálják a felhasználót, védik a nyaki gerincet és lehetővé teszik a fej megfelelő pozicionálását.



Terméktulajdonságok



Átfogó törzs- és fejtámaszt nyújt a fokozott stabilizálást igénylő személyeknek, beleértve a cerebrális bénulásban és gerincferdülésben szenvedőket.



Puha, formált fűzőként működik, alternatívaként szolgálva a merev fűzők helyett.



Rugalmas formája állítható pozicionálást tesz lehetővé.



Aszimmetrikus háttámaszt tesz lehetővé scoliosisban szenvedő személyek számára, hiszen a bordapúpokhoz alakítható.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa
+ neoprén szíj

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítősíj
+ Tubo





Comfortable Plus Duo

ülőke a törzs, végtagok és fej stabilizálásához

Az oldalsó párnákkal és fejtámasszal ellátott ülőke egyesíti a háttámla és ülőke funkcióit, csípőstabilizálást, gerincgörbület-korrekciót és fejtámaszt kínálva. Az oldalsó párnák a neoprén szíjjal együtt kiváló törzsstabilizálást biztosítanak.



Terméktulajdonságok



Olyan ülőkét alkot, amely stabilizálja a medencét és a törzset, kényelmet és biztonságot nyújtva, különösen spaszticitással vagy izomatropiával rendelkező személyeknek.



A combtekercesk és csatornák kialakításának lehetősége mélyülő pozíciót tesz lehetővé.



A nagy fejtámasz a fejestabilizálást segíti, az oldalsó párnák megakadályozzák a gerincgörbületek rosszabbodását.



A kontúros forma csökkenti a nyomást a csontos kiemelkedéseken.



Önálló ülőkeként vagy a kerekesszék háttámlájaként is használható.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa
+ neoprén szíj

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítőszíj
+ Tubo
+ Sticky Pad





Comfortable Plus Duo Hilo

ékkal ellátott ülőke a törzs, végtagok és fej stabilizálásához

A Comfortable Plus Duo modell fejlett változata, amelyet egy ék egészít ki, növelve a csípő stabilizálását és javítva a felhasználó kényelmét. Az ék hatékonyan támogatja a medence helyes pozicionálását és megakadályozza az ülőkéből való kicsúszást.



Terméktulajdonságok



A speciálisan kontúrozott ék abduált helyzetben tartja a lábakat, csökkentve a kontraktúrákat és a lábak keresztetését.



Lehetővé teszi a mélyülő pozíció elérését, ösztönözve az aktív törzskontrollt.



Az oldalsó párnák és fejtámasz aszimmetrikus törzstámaszt tesznek lehetővé.



Az egész hátat megtámasztva csökkenti a felfekvési sebek kockázatát.



Önálló ülőkeként vagy a kerekesszék háttámlájaként is használható.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa
+ neoprén szíj

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítősíj
+ Tubo
+ Sticky Pad



Armrest

könyöktámasz

Könnyen formázható és állítható könyöktámasz, ideális kerekesszékekhez és rehabilitációs székekhez. Alkarmegtámasztást biztosít és lehetővé teszi a kéz precíz pozicionálását és megtámasztását.



Terméktulajdonságok



Egyszerű formázás és igazítás a kéz anatómiai formájához – korrekció és stabilizálás fokozott izomtónusú és kontrak-túras személyeknél.



Hemiplégia esetén segít az alkar optimális szögének fenntartásában.



Egyszerű beépítés különböző típusú ülőkékbe és kerek-esszékekbe.



Stabil alkarmegtámasztást nyújt cerebrális bénulással élő gyermekek és felnőttek számára.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ Splint
+ Tubo



Headrest

fejtámasz

Hatékony fejestabilizálást nyújtó fejtámasz. Állítható formájának köszönhetően kényelmes és biztonságos támaszt biztosít. A szög és keménység gyors testre-szabása lehetővé teszi a fejtámasz egyéni igények-hez való igazítását. A legtöbb kerekesszéssel és rehabilitációs széssel kompatibilis.



Terméktulajdonságok



Egyszerű formázás és igazítás a fej formájához – növeli a kényelmet ülés vagy fekvés közben.



Aszimmetrikus fejtámaszt tesz lehetővé súlyos spaszticitással, törzs-deformációkkal rendelkező felhasználók számára.



Kiváló fejestabilizálást és -támaszt nyújt, javítva a fejkontrollt alacsony izomtónusú személyeknél.



Speciális rögzítőrendszernek köszönhetően a legtöbb kerekesszékekhez illeszthető.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa
+ fejtámasz rögzítő

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ rögzítősíj
+ Tubo





Collo

gallér

Vákuumalapú pozícionáló rendszer állítható gallér formájában, amelyet olyan egyének számára terveztek, akiknek korlátozott vagy egyáltalán nincs fejkontrollja. Lehetővé teszi mind az alak, mind a stabilizálás mértékének pontos beállítását, hogy megfeleljen a felhasználó egyéni igényeinek.



Terméktulajdonságok



A rendszer támogatja a fej pozícióját frontális, szagittális és a transzverzális síkban. Megakadályozza a fej eldőlését, lecsúszását és túlzott elfordulását, elősegítve ezzel a biztonságos és helyes pozíció fenntartását.



A gallér alakjának és keménységének állításával pontosan a viselő anatómiai adottságaihoz és igényeihez igazítható. Az alakja többször is módosítható anélkül, hogy a terméket le kellene cserélni.



A fej beállított stabil helyzete elősegíti a megfelelő légzést és csökkenti az izmok feszességét. Továbbá biztosítja a kényelmet a mindennapi tevékenységek során tartós használat esetén is.



A rendszer célja, hogy támogassa a mozgás- és egyensúly zavarokkal küzdő személyek rehabilitációját és hosszú távú gondozását. A terapeuta tanácsait figyelembe véve a megfelelő beállítás növeli egyaránt a hatékonyságot és a biztonságos használatot.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa



Beanseat

ortopédiai ülőke

Az ortopédiai babzsák-ülőke a medence, törzs és fej stabilizálását biztosítja, kényelmet nyújtva ülő és félfekvő helyzetben egyaránt. Ergonómikus kialakításának köszönhetően a puha babzsák-szerkezet alkalmazkodik a testhez, miközben az egész gerincet megtámasztja.

Terméktulajdonságok



Méretének és formájának köszönhetően a Beanseat alkalmazkodik a testhez, vagy szükség esetén kikényszeríti a kívánt pozíciót. Fokozza a stabilizálást és a biztonságot feszes izomtónusú felhasználóknál is.



A nagy támaszfelület kényelmet biztosít ülés közben, csökkentve a felfekvési sebek kockázatát.



Főként fekvő emberek számára lehetővé teszi a félülő pozícióba való átmenetet.



A párna könnyen formázható alakja lehetővé teszi a felhasználó megfelelő pozicionálását terápiás foglalkozáshoz.



A keménységtől függően a Beanseat kemény ülőkeként vagy puha babzsákként is szolgálhat.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa
+ védőhuzat

Kompatibilis:
+ MembraMed membránnal ellátott huzat
+ stabilizáló rövidnadrág
+ Beanroller
+ autós töltő
+ akkumulátoros töltő
+ Bob





Multiseat

hát- és fejtámasztó ülőke

Átfogó ortopédiai ülőke a medence, törzs és fej stabilizálásához. Egy alumíniumkeretre szerelt három párnából áll a Stabilo Multiseat rendszerből. Kiválóan működik hintaként relaxáció és rehabilitáció során, valamint önálló ortopédiai ülőkeként.



Terméktulajdonságok



Az alumíniumkeret növeli a párnák merevségét és lehetővé teszi a keret testreszabását.



A három különálló párna lehetővé teszi a különböző testrészek keménységének egyéni beállítását.



A kontúros kárpitozás támaszt és stabilizálást nyújt a hát és medence számára, még súlyos deformációk esetén is.



A belső szíjrendszer, beleértve a mellényt és az abduciós hevedereket, fokozza a biztonságot ülés közben.



A szabályozható fejtámasz lehetővé teszi a fej és nyaki gerinc rögzítését és stabilizálását.



Tartozékok

Tartalmazza:

- + kézi pumpa
- + neoprén szíj
- + hintaszíj
- + döntőék

Kompatibilis:

- + elektromos pumpa
- + akkumulátoros töltő
- + autós töltő
- + stabilizáló rövidnadrág
- + stabilizáló mellény



Grande

matrac

A pozicionáló matrac ülő vagy fekvő helyzetben stabilizálja a felhasználót, segítve a törzs, medence, végtagok és fej helyes elrendezését. Pontosan illeszkedik a testhez, kényelmet biztosítva és lehetővé téve a testtartás-korrekciót. Súlyos deformációkkal rendelkező személyek számára ideális, megkönnyíti a rehabilitációs gyakorlatokat és csökkenti a felfekvési sebek kockázatát. Önálló ülőkeként is használható.



Terméktulajdonságok



A matrac kompenzálja és enyhíti a diszfunkciókat azáltal, hogy stabilizálja a felhasználót ülő vagy fekvő helyzetben.



Testtartás-korrekciót tesz lehetővé. A nagy mennyiségű granulátum és méretei lehetővé teszik a pontos illeszkedést az egész testhez.



Megfelelő formázás után a matrac pozicionálja a felhasználót, lehetővé téve a rehabilitációs gyakorlatokat.



A testfelület nagy területen való megtámasztásával csökkenti a felfekvési sebek kockázatát.



Önálló ülőkeként is használható.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa
+ védőhuzat

Kompatibilis:
+ MembraMed
membránnal ellátott
huzat
+ akkumulátoros töltő
+ autós töltő
+ Bob





Flat

lábpad

A lábpadként szolgáló vákuumos korrekciós párna a terápiás blokkrendszer egyik eleme. Rugalmasságának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a lábak formájához, stabilizálva azokat a helyes pozícióban és támaszt nyújtva. Lábpadon kívül széktámlaként, állókeretekben és ülőrendszerekben is kiválóan használható háttámlaként.



Terméktulajdonságok



Korrigálja a lábfej deformációit és rendellenességeit. Aszimmetrikus támaszt nyújt bokaízületi deformációkban szenvedők számára (lóláb, dongaláb, valgus, hallux valgus).



Megelőzi a felfekvési sebeket a lábak és bokaízületek körül.



A könnyen formázható alak változó formát és keménységet biztosít.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ neoprén szíj
+ rögzítősíj
+ Tubo



Banana

banán

A banán alakú vákuumos párna a terápiás blokkrendszer egy összetevője, amely hatékonyan támogatja a napi rehabilitációt. Ideális az alkar nem hagyományos megtámasztásához, alkalmazkodva a felhasználó egyéni igényeihez.



Terméktulajdonságok



Korrigálja a kéz és alkar deformációit és rendellenességeit.



A könnyen formázható alak változó formát és keménységet biztosít, pozicionálva és stabilizálva a kezeket a kívánt terápiás helyzetben.



Fontos szerepet játszik a nyomásfekélyek megelőzésében az alkar területén.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ neoprén szíj
+ rögzítőszíj
+ Tubo



Roll

henger

A henger formájú vákuumos párna a terápiás blokkrendszer része. Kiváló támaszt nyújt a napi rehabilitációhoz és értékes kiegészítője a pozicionáló terápiának.



Terméktulajdonságok



Mozgásrehabilitáció során alkalmazható. Felhasználható a végtagok abdukciójához, teststabilizáláshoz és egyes testrészek megtámasztásához is.



Ülő vagy fekvő helyzet megtámasztásaként is szolgálhat.



Kiválóan alkalmazható hipoton betegek vagy gerinc bifidában szenvedők pozicionáló terápiájában.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ neoprén szíj
+ rögzítősíj
+ Tubo



Wedge

ék

Az ék alakú vákuumos párna a terápiás blokkrendszer része, amely segít stabilizálni a felhasználót foglalkozásterápia, rehabilitáció vagy otthoni pozicionáló terápia során. Hatékonyan stabilizálja és korrigálja a páciens testtartását. A vákuumtechnológiának köszönhetően tetszőleges vastagságra és szögre formázható.



Terméktulajdonságok



Támogatja a felhasználó pozicionálását terápia és rehabilitáció során hason fekvő helyzetben.



Légzési rendellenességekkel küzdő személyek számára lehetővé teszi a könnyebb légzést elősegítő kényelmes fekvőhelyzet felvételét.



Ülő vagy fekvő helyzet megtámasztásaként is szolgálhat.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ elektromos pumpa
+ neoprén szíj
+ rögzítőszíj
+ Tubo



Bath Bagel

terápiás asztal

A Bath Bagel vákuumos pozicionáló rendszer egy innovatív termék, amely kiváló fejtámaszt biztosít fürdés közben, a fejet a víz felett tartva és megakadályozva az elmerülést. A speciális rögzítősíjnak köszönhetően a felhajtóerő a mellkasra hat, tehermentesítve a nyakat és a fejet – kényelmet, biztonságot és stabilitást biztosítva, miközben teljes relaxációt tesz lehetővé a vízben.



Terméktulajdonságok



Kiváló fejestabilizálást biztosít fürdés közben neurológiai állapotokkal, csökkent vagy teljes fejkontroll-hiánnyal rendelkező személyeknek.



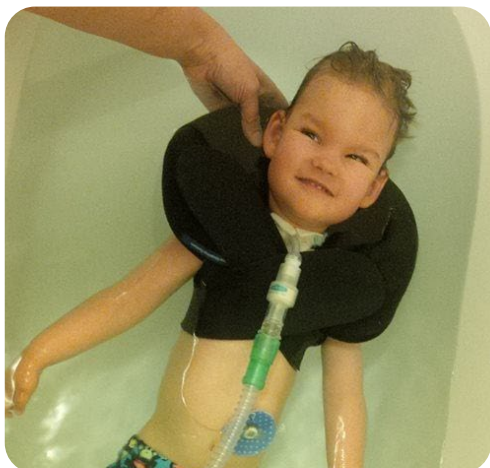
A vákuumforma és a speciálisan tervezett alak a hónalj alatt átfutó rögzítősíj-rendszerrel kombinálva biztonságot és kényelmet biztosít a felhasználónak.



Terápiás funkciót tölt be neurológiai állapotokkal rendelkező személyek számára, lehetővé téve a szabad végtagmozgást a vízben.



A fürdőtámasz-párna könnyen szárítható, kompakt és könnyű.



Tartozékok

Tartalmazza:
+ kézi pumpa

Kompatibilis:
+ Tubo



Stabilo System kiegészítők



Kézi pumpa

A vákuumos kézi pumpa a kis és közepes méretű Stabilo párnák precíz formázását teszi lehetővé, így azok pontosan a felhasználó igényeihez és testformájához alakíthatók. Könnyű kezelni és megbízható.

Tartalmazza:

Base, Base Hilo, Base Doro, Comfortable, Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Comfortable Plus Duo Hilo, Armrest, Headrest, Collo, Multiseat, Flat, Banana, Roll, Wedge, Bath Bagel



Elektromos pumpa

Electro Vacuumer™

A nagy teljesítményű elektromos pumpa megkönnyíti a nagy Stabilo párnák formázását. 12V-os tápellátása lehetővé teszi a biztonságos használatot és csatlakoztatást autós csatlakozóhoz.

Tartalmazza:

Beanseat, Grande

Kompatibilis:

Base, Base Hilo, Base Doro, Comfortable, Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Comfortable Plus Duo Hilo, Armrest, Headrest, Collo, Multiseat, Flat, Banana, Roll, Wedge, Bath Bagel, Bob, Autós töltő, Akkumulátoros töltő



Autós töltő

Olyan tápkábel, amely lehetővé teszi az elektromos pumpa csatlakoztatását az autó cigarettagyújtó aljzatához (12V). Lehetővé teszi a pumpa használatát, ahol hagyományos hálózati áramellátáshoz való hozzáférés korlátozott.

Kompatibilis:

Elektromos pumpa





Akkumulátoros töltő

Hordozható akkumulátoros tápegység az elektromos pumpa használatához. Lehetővé teszi a pumpa működtetését hálózati áramellátáshoz való csatlakoztatás nélkül.

Kompatibilis:

Elektromos pumpa



Neoprén szíj

A rugalmas neoprén szíj hatékony stabilizálást nyújt a felhasználónak a párnán belül, biztosítva a helyes testtartás kényelmes és biztonságos fenntartását. Tépőzáras felületének köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható különböző magasságokban.

Tartalmazza:

Base Doro, Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Comfortable Plus Duo Hilo, Multiseat

Kompatibilis:

Flat, Banana, Roll, Wedge



Rögzítőszíj

Az univerzális, állítható szövetszíj lehetővé teszi a párna biztonságos és stabil rögzítését kerekesszékhez, karosszékhez vagy székhez. Fő funkciója a párna csúszásának megakadályozása.

Kompatibilis:

Base, Base Hilo, Base Doro, Comfortable, Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Comfortable Plus Duo Hilo, Headrest, Flat, Banana, Roll, Wedge





Stabilizáló rövidnadrág

A nadrágot a medence stabilizálására és a combok távolítására használják. Hatékony a medence pozicionálásában és segít helyreállítani a helyes testtartást.

Kompatibilis:

Beanseat, Multiseat



Stabilizáló mellény

Az univerzális mellény támogatja a törzs korrekcióját és stabilizálását, megakadályozva az előre dőlést. Négy állítható szíj biztosít jobb illeszkedést a testhez.

Kompatibilis:

Multiseat



Fejtámasz rögzítő

A neoprén zseb lehetővé teszi a Headrest gyors és biztonságos csatolását különböző típusú kerekesszékekhez és ülőkékhöz.

Tartalmazza:

Headrest





Splint

könyöktámasz rögzítő

Az univerzális alap lehetővé teszi az Armrest stabil felszerelését különböző kerekesszék-, szék- és ülőke-modellekre.

Kompatibilis:

Armrest



MembraMed membránnal ellátott huzat

A rugalmas huzat fokozza a higiéniát. Membrántechnológiával készült: folyadékhatalmatlan, de vízgőzt és levegőt átenged. A sima, ráncmentes anyag kíméletes a felhasználó bőrével szemben. Az anyag antibakteriális tanúsítvánnyal rendelkezik.

Kompatibilis:

Beanseat, Grande



Sticky Pad

csúszásgátló alátét

A tépőzáras anyaggal bevont neoprén csúszásgátló alátét növeli a párnák stabilitását sima és egyenetlen felületeken.

Kompatibilis:

Base, Base Hilo, Base Doro, Comfortable Plus Duo, Comfortable Plus Duo Hilo





Tubo

Rugalmas csövek a Stabilo párnák precíz formázásához. Megkönnyítik az aszimmetrikus formák kialakítását és további stabilizálást biztosítanak.

Kompatibilis:

Confortable, Confortable Plus, Confortable Plus Duo, Confortable Plus Duo Hilo, Armrest, Headrest, Flat, Banana, Roll, Wedge, Bath Bagel



Beanroller

[mobil platform](#)

A Beanseat ülőke felhasználóval együtt történő biztonságos szállítására tervezett mobil platform. Stabil lábpaddal, csúszásmentes felülettel, ergonomikus fogantyúval és tartós kerekekkel rendelkezik.

Kompatibilis:

Beanseat



Bob

A Stabilo Bob egy könnyű, intuitív eszköz a Stabilo párnák formázásához. Egyetlen gombbal rendelkezik a szíváshoz és a levegőbefújáshoz, valamint kettős csövekkel, amelyek tartósan csatlakoztathatók mind a párnához, mind az elektromos pumpához.

Kompatibilis:

Elektromos pumpa



Gyakorlati információk

Stabilo Tépőzár ⁴³

Biztonsági és minőségi garancia ⁴⁴

Mosás és fertőtlenítés ⁴⁶

Párna formázása ⁴⁷

Stabilo Tépőzár - rugalmas illeszkedés és biztonságos rögzítés

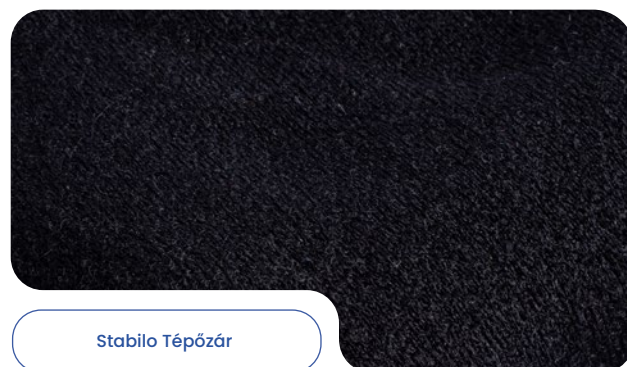
A Stabilo Tépőzáras párnák többet jelentenek, mint egy standard megoldás – a mindennapi használat funkcionálisának és kényelmének új szintjét kínálják.

A párna alján lévő puha tépőzáras szövetnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a Stabilo kiegészítőkkel.

A tépőzáras felület segítségével könnyedén csatlakoztathatók a párnák a rögzítőszíjakhoz, a Sticky Pad csúszásgátló alátétéhez, a Tubo csövekhez és más kiegészítőkhöz – bárhol, ahol kompatibilis tépőzáras felület található.



Stabilo Neoprén



Stabilo Tépőzár



A tépőzáras változat az alábbi termékeknél elérhető:

Base Hilo, Base Doro, Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Comfortable Plus Duo Hilo, Headrest, Armrest, Collo, Multiseat, Flat, Banana, Roll, Wedge, Bath Bagel.

Tépőzáras verzióban kérésre más modellek is rendelhetők.

Biztonsági és minőségi garancia

Termékeink kiváló minőségű neoprén anyagokból készülnek, amelyeket egy európai szállítótól szerzünk be, amely megfelel a REACH rendelet (EK 1907/2006) szigorú követelményeinek – az EU kémiai biztonsági szabványának.

Ez azt jelenti, hogy:

- + tartósak, stabilak és ellenállnak az intenzív használatnak,
- + nem tartalmaznak SVHC anyagokat (nagyon nagy aggodalomra okot adó anyagok),
- + biztonságosak bőrrel való érintkezés esetén – még hosszan tartó használat során is,
- + tűzállók – nem éghető anyagok és nem terjesztik a tüzet,
- + az Európai Unióban való használatra jóváhagyottak.

Az Európai Unió irányelveinek megfelelő: EMC, LVD, RoHS, and ErP

A készülékeinkben használt alkatrészek megfelelnek az Európai Unió szigorú előírásainak a következő területeken:

- + Elektromos biztonság (LVD),
- + Elektromágneses kompatibilitás (EMC),
- + Energiatakarékosság (ErP),
- + Veszélyes anyagok használatának korlátozása az elektrotechnikában (RoHS).

Antibakteriális védelem a fokozott higiénia érdekében

A MembraMed membránnal ellátott Stabilo huzatokat az Intertek független laboratórium tesztelte az AATCC 147:2011 szabvány szerint. A tesztek megerősítették a káros baktériumok növekedésének hatékony gátlását (*Staphylococcus aureus* és *Klebsiella pneumoniae*) kiegészítő vegyi anyagok szükségessége nélkül.



Nincs latex az anyagösszetételben

Minden anyag, amely közvetlen érintkezésbe kerül a felhasználó bőrével, 100%-ban latexmentes. Ez azt jelenti, hogy nem tartalmaznak természetes gumifehérjéket – olyan anyagokat, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak.

Ennek köszönhetően termékeink teljesen biztonságosak latexallergiával diagnosztizált személyek, gyermekek, bőrproblémával küzdő betegek és fokozott orvosi óvatosságot igénylők számára.



Garancia és értékesítés utáni támogatás

Minden Stabilo System párna csúcskategóriás orvostech-nikai eszköz, és 24 hónapos gyártói garanciával rendel-kezik.

Ebben az időszakban teljes körű szervizszolgáltatást biztosítunk az anyaghibákra és a megfelelő használatból eredő károokra.

A garancia lejártá után sem hagyjuk el felhasználóinkat – garancián túli szervizszolgáltatást kínálunk, amely lehetővé teszi a termékek javítását és felújítását.



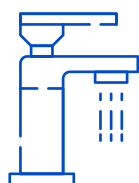
Mosás és fertőtlenítés

A Stabilo System párnákat napi intenzív használatra tervezték – beleértve az igényes egészségügyi környezeteket is.


A vízálló neoprén tartós nejlonszövettel való bevonásának köszönhetően könnyen tisztán és higiénikusan tarthatók.



A párnák moshatók:



folyóvíz alatt

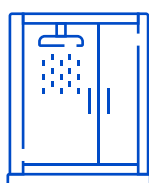

kádban vagy
zuhany alatt



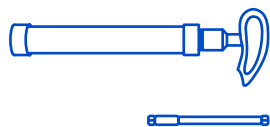
mosógépben*

*legfeljebb 40°C-on, megfelelő mosószerekkel

Kórházakban és egészségügyi létesítményekben általánosan használt megfelelő fertőtlenítőszer alkalmazása is megengedett.

Hogyan formázzon Stabilo párnát?

Kézi pumpával




01 Kezdje a felszerelés előkészítésével – óvatosan vegye ki a csövet a kézi pumpa tartójából.



02 Csavarja le a szelepszapkát, csavarja rá a csövet a szelepre, és várja meg, amíg a párna megpuhul – puha gyurma állagára.




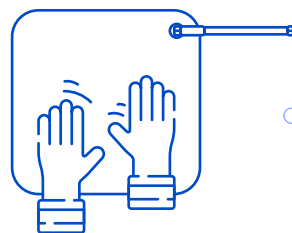Levegő áramlik a párna belsejébe, fellazítva a benne lévő granulátumokat, ami puhává és formálhatóvá teszi a párnát.





03 Formázza meg a párnát nagyjából a felhasználó testalkatához igazodva.

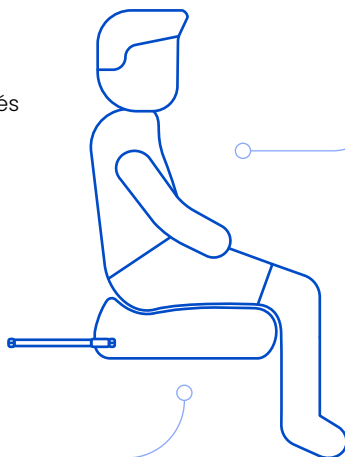04 Helyezze a felhasználót a párnára. Figyeljen a megfelelő támaszra, kényelmes pozícióra és az ülő vagy fekvő személy általános kényelmére.



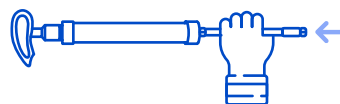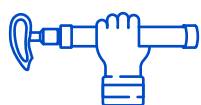05 Csavarja a pumpát a csőre, és szívja ki a levegőt, amíg a párna eléri a kívánt keménységet és stabilitást.



06 A folyamat befejezése után csavarja le a pumpacsövet a párnáról, és zárja le a szelepet a sapkával.



A párna aljakjának újra formálásához csavarja rá a csövet a szelepre, várjon amíg felpuhul és formálja a kezeivel a kívánt formára.

Hogyan formázzon Stabilo párnát?

Elektromos pumpával

01 Csatlakoztassa a pumpát – csavarja le a szelepsapkát, csavarja rá a csövet a párna szelepére, és dugja a másik végét az elektromos pumpa SOFT aljzatába.

02 Kapcsolja be a pumpát, és várja meg, amíg a párna megpuhul.

04 Helyezze a felhasználót a párnára. Biztosítsa a megfelelő támaszt, kényelmes pozíciót és a felhasználó kényelmét.

03 Formázza meg a párnát nagyjából a felhasználó testalkatához igazodva.

05 Váltsa a csövet a HARD aljzatra. Kapcsolja be a pumpát a levegő kiszívásához, amíg el nem éri a kívánt keménységet.

06 A folyamat befejezése után csavarja le a pumpacsövet a párnáról, és zárja le a szelepet a sapkával.



A párna alakjának újra formálásához csavarja rá a csövet a szelepre, várjon amíg felpuhul és formálja a kezeivel a kívánt formára.



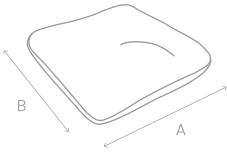
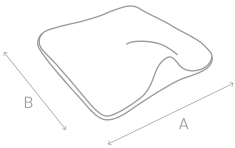
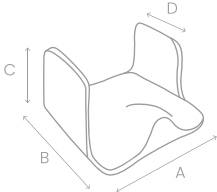
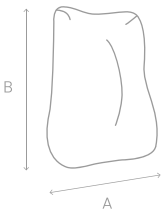
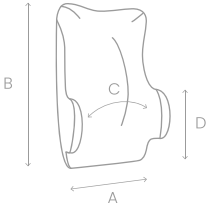
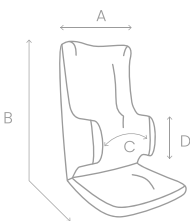
Mérettáblázat















Stabilo System párnák ⁵¹










Stabilo System kiegészítők ⁵⁴

Terméknév	Típus / méret	Cikkszám Alap változat	Cikkszám Tépőzáras változat	Méretek [cm]			
				A	B	C	D
Base 	S	2990583	2990583/V	25	38	-	-
	S+	2990585	2990585/V	35	35	-	-
	M	2990584	2990584/V	40	40	-	-
	M+	2991160	2991160/V	45	45	-	-
	L	2990586	2990586/V	50	50	-	-
Base Hilo 	S	-	2990776/V	25	38	-	-
	S+	-	2990777/V	35	35	-	-
	M	-	2990778/V	40	40	-	-
	M+	-	2990779/V	45	45	-	-
	L	-	2990780/V	50	50	-	-
Base Doro 	S	-	2990798/V	25	30	21	14
	S+	-	2990799/V	35	35	23	18
	M	-	2990800/V	40	40	27	20
	M+	-	2990801/V	45	45	30	29
Comfortable 	S	2990587	2990587/V	52	40	-	-
	M	2990588	2990588/V	56	50	-	-
	L	2990589	2990589/V	70	50	-	-
Comfortable Plus 	S	-	2991031/V	30	50	58	28
	M	-	2991032/V	35	60	65	28
	L	-	2991033/V	40	75	75	35
	XL	-	2991034/V	45	75	85	35
Comfortable Plus Duo 	S	-	2991035/V	30	80	58	28
	M	-	2991036/V	35	95	65	28
	L	-	2991037/V	40	115	75	35
	XL	-	2991038/V	45	120	85	35
	XXL	-	2990795/V	50	140	95	35

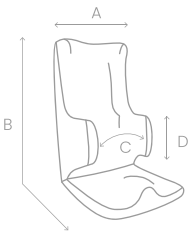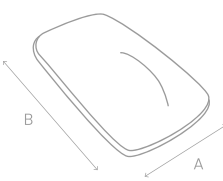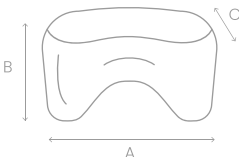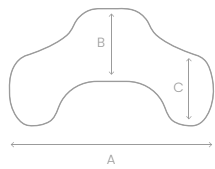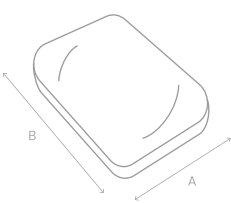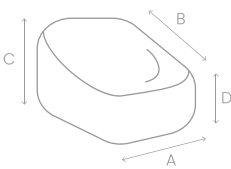Terméknév	Típus / méret	Cikkszám Alap változat	Cikkszám Tépőzáras változat	Méretek [cm]			
				A	B	C	D
Confortable Plus Duo Hilo 	S	-	2990781/V	30	80	58	28
	M	-	2990782/V	35	95	65	28
	L	-	2990783/V	40	115	75	35
	XL	-	2990784/V	45	120	85	35
	XXL	-	2990797/V	50	140	95	35
Armrest 	M	-	2991261/V	20	30	-	-
	L	-	2991262/V	25	45	-	-
Headrest 	M	-	2990618/V	30	15	14	-
	L	-	2990708/V	35	20	17	-
Collo 	S	-	2990832/V	38	12	12	-
	M	-	2990833/V	45	15	15	-
	L	-	2990834/V	50	15	15	-
Grande 	M	2990872	2990872/V	70	160	-	-
	M+	2991163	2991163/V	90	200	-	-
	L	2990591	2990591/V	130	200	-	-
Beanseat 	M	2991281	2991281/V	60	80	50	40
	L	2991282	2991282/V	70	100	70	50
	XL	2990796	2990796/V	70	100	100	70

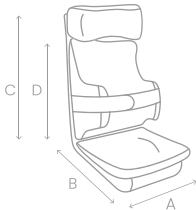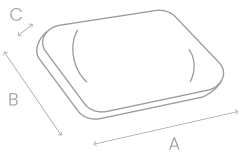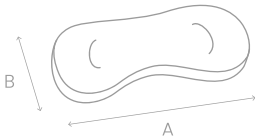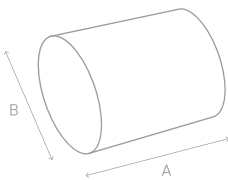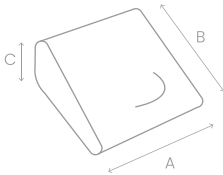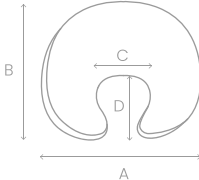Terméknév	Típus / méret	Cikkszám Alap változat	Cikkszám Tépőzáras változat	Méretek [cm]			
				A	B	C	D
Multiseat 	M	-	2991296	38	35	53-62	49-58
	L	-	2991297	42	40	73-82	69-78
Flat 	S	-	2990817/V	60	40	6	-
	M	-	2990745/V	80	50	6	-
	L	-	2990746/V	100	50	8	-
Banana 	S	-	2990737/V	50	25	-	-
	M	-	2990738/V	55	35	-	-
	L	-	2990739/V	80	35	-	-
Roll 	S	-	2990740/V	50	25	-	-
	M	-	2990741/V	50	35	-	-
	M+	-	2990742/V	80	18	-	-
	L	-	2990743/V	80	25	-	-
	XL	-	2990744/V	80	35	-	-
Wedge 	M	-	2990611/V	40	40	25	-
	L	-	2990613/V	45	60	40	-
Bath Bagel 	S	-	2990755/V	35	30	10	12
	M	-	2990754/V	37	35	12	17
	M+	-	2990768/V	55	45	12	17
	L	-	2990723/V	60	45	17	22

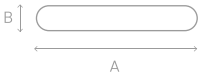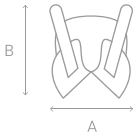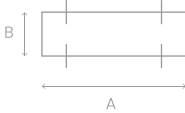Terméknév		Típus / méret	Cikkszám Alap változat	Cikkszám Tépőzáras változat	Méretek [cm]			
					A	B	C	D
Kézi pumpa		U	2990641	-	-	-	-	-
Elektromos pumpa		U	2990605	-	-	-	-	-
Autós töltő		U	2990606	-	-	-	-	-
Akkumulátoros töltő		U	2990607	-	-	-	-	-
Neoprén szíj		M	-	2991269/v1	130	9	-	-
		L	-	2991269/v2	160	9	-	-
Rögzítőszíj		U	2991273	-	140	5	-	-
Stabilizáló rövidnadrág		U	2990610	-	-	-	-	-
Stabilizáló mellény		M	2990730	-	28	40	-	-
		L	2990731	-	35	50	-	-
Fejtámasz rögzítő		U	2991287	-	-	-	-	-
Splint		U	2991263	-	30	10	-	-

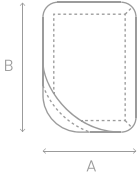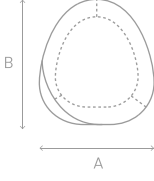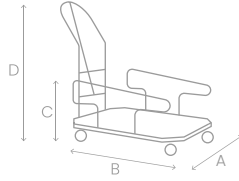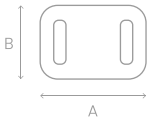Terméknév		Típus / méret	Cikkszám Alap változat	Cikkszám Tépőzáras változat	Méretek [cm]			
					A	B	C	D
MembraMed huzat a Grande termékhez		M	2990734	-	70	160	-	-
		M+	2990735	-	90	200	-	-
		L	2990736	-	130	200	-	-
MembraMed huzat a Beanseat termékhez		M	2990732	-	60	80	-	-
		L	2990733	-	70	100	-	-
Tubo		U	2990784	-	-	-	-	-
Beanroller		M	2990770	-	60	80	44	66
		L	2990769	-	70	100	50	66
Sticky Pad		S	2990805	-	25	30	-	-
		M	2990806	-	35	35	-	-
		L	2990807	-	45	45	-	-
Bob		U	2990810	-	-	-	-	-



A Stabilo System párnák gyártója:

NOEL

NOEL Żebrowski sp. j.
Christo Botewa 4A, 30-798 Kraków
www.noel.krakow.pl

www.stabilo.krakow.pl
@StabiloSystem

**A Stabilo System Magyarországi
forgalmazója:**



Sher Európai Rehabilitációs Központ Kft.
1149. Budapest, Pillangó park 7., fszt. 1-2
www.shercp.com
office@shercp.com
@sher_rehabilitation